

ONA

L'esthétique du visage à
un niveau supérieur



L'ONA enfreint les règles.

L'appareil INDIBA® ONA associe l'hydrodermabrasion (double peeling), l'électroporation, l'électrothérapie par LED et basse fréquence pour hisser votre peau à un nouveau niveau de santé et de pureté.

ONA représente le plaisir, les sensations, la pureté et la perfection. Optimisez et mettez en valeur votre peau avec ONA.

Bénéfices clés

- Exfolie, nettoie et élimine les impuretés
- Hydrate en profondeur
- Éclaircit et unifie le teint de la peau
- Renforce le tonus musculaire, contribuant ainsi à améliorer les contours du visage
- Améliore l'aspect général de la peau

Technologie

INDIBA®, innove différentes technologies constituant la clé pour satisfaire les besoins de nos clients.

→ Peeling Chimique

Élimine le sébum et les impuretés de la peau, tout en apportant des principes actifs anti-âge grâce à nos solutions ON.

→ Électrothérapie à Basse Fréquence

La basse fréquence modulée (1 kHz) contribue au mouvement du muscle de manière contrôlée afin de tonifier la structure au visage.

→ Peeling Mécanique

Élimine et nettoie les impuretés par pression sous vide (15 kPa à 80 kPa).

→ Électroporation + LED

Favorise la pénétration du sérum hydratant ONA par les pores temporaires des cellules formés à travers des impulsions à haute tension de courte durée.

ONA



①
Hydrodermabrasion
Tête Cleansing

(Pièce à main ONA)

► SOLUTIONS

②
Électroporation + LED
Tête Infuse

(Pièce à main ONA EP)

► ONA SÉRUM HYDRATANT

③
Électrothérapie à basse
fréquence + massage
Tête Workout

(Pièce à main ONA Y)

► GEL ONA



1. Nettoyage profond

Hydrodermabrasion

Peeling chimique + mécanique

Il permet d'éliminer les points noirs et les impuretés à l'aide d'une solution spéciale éjectée avec une puissance importante, puis aspirée avec notre embout radial, sans endommager la peau.



Nettoyage et exfoliation sous vide



Nettoyage profond



Pénétration efficace des solutions

Solutions: ON1, ON2 et ON3



ON1 AHA

Formule constituée d'un mélange d'alpha-hydroxyacides (AHA) d'origine naturelle et d'extraits apaisants et régénérants, spécialement destinée à exfolier, nettoyer et soigner la peau en profondeur.



ON2 BHA

Formule conçue pour purifier et régénérer la peau grâce à l'acide salicylique (BHA), à l'extrait de saule et à d'autres principes actifs apaisants et régénérants, convenant parfaitement au traitement des pores obstrués et des imperfections cutanées. Idéale pour la zone T.



ON3 Complexe anti-âge


Formule spécialement conçue pour restaurer la fonction barrière, hydrater en profondeur et illuminer la peau grâce à un mélange d'acide hyaluronique, de peptides régénérants et d'extraits de plantes aux effets anti-âge.

Conseils de traitement



Les solutions ON1, ON2 et ON3 sont réparties radialement dans les embouts de traitement à usage unique, disponibles en petites et grandes tailles, afin de personnaliser le traitement en fonction du type de peau ou de la zone à traiter.

Ce mouvement radial permet de nettoyer les pores en profondeur sans endommager la peau.

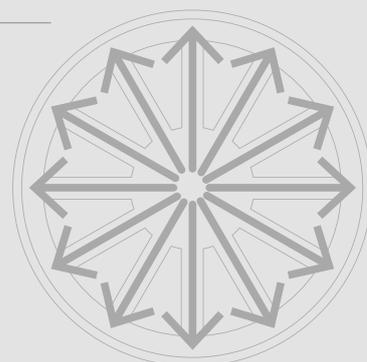

Infusion et traitement

Synergie technologique


Électroporation + LED

Renforce et accélère la pénétration des principes actifs du sérum hydratant ONA jusqu'à 5 mm de profondeur, grâce aux canaux temporaires formés en stimulant la membrane cellulaire par des impulsions à haute tension.

Au cours de ce processus, la structure et la fonction biologiques des cellules ne sont ni endommagées ni modifiées.

Luminothérapie efficace :

Les différentes longueurs d'onde des lumières LED entraînent une synergie avec l'électroporation, en améliorant les résultats.

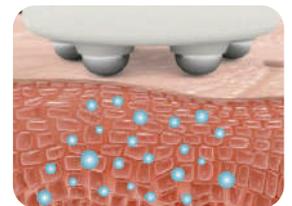

Sérum hydratant ONA

Sérum concentré à l'effet anti-âge puissant grâce à sa teneur en extraits végétaux hydratants et réparateurs, en acide hyaluronique de poids moléculaire moyen et en peptides capables de stimuler la production de collagène et de renforcer la fonction barrière de la peau.

Le sérum hydratant ONA a été spécialement formulé par INDIBA® avec des ingrédients actifs de la plus haute qualité.

Ses ingrédients sont les suivants :

→ Acide hyaluronique de poids moléculaire moyen

Acide hyaluronique d'une taille spécifique capable de stimuler les cellules épithéliales endommagées et/ou vieillissantes, permettant ainsi d'obtenir une peau plus lisse, plus douce et plus uniforme.

→ Bétaïne

La bétaïne a des propriétés apaisantes, elle renforce la barrière cutanée en stimulant l'intégrité et la cohésion des cellules, atténuant les rougeurs et protégeant la peau de l'exposition aux substances nocives.

→ Peptides anti-âge

Petits peptides endogènes dérivés de la protéolyse de la matrice extracellulaire, capables de réguler, réparer et régénérer les peaux endommagées et/ou vieillissantes.



3. Workout

Effet Anti-âge Total

Électrothérapie à basse fréquence + massage

Elle stimule les muscles du visage, en contractant et en relaxant les tissus de manière répétée. Elle atténue également les tensions et améliore l'apport de nutriments en stimulant la circulation sanguine locale.



Courant basse fréquence (1 kHz)



Sphères compactes avec rotation à 360°



Amélioration de l'élasticité de la peau




Massage musculaire par stimulation profonde




Régénération de la peau, stimulation des muscles et élimination des impuretés



Amélioration de la circulation sanguine

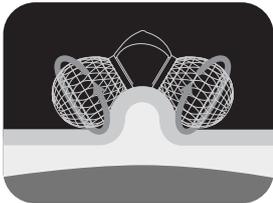

MASSAGE

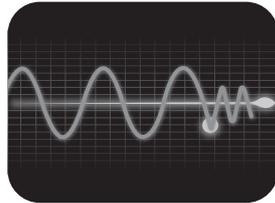

BASSE FRÉQUENCE (1 kHz)

Gel protecteur pour l'électrothérapie ONA

Gel conducteur spécialement formulé pour maximiser les résultats de l'ONA, de manière sûre et efficace.





Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Puissance d'entrée | 220-240V, 50/60Hz |
| Fusible d'entrée | 2 xT 10AL 250V |
| Consommation électrique | 250 Watts |
| Poids | 25 kg (y compris les solutions) |
| Taille | 448mm x 438mm x 391mm (H x L x P) |
| Écran | 7-inch LCD pouces |
| Tête Cleansing | Niveau 1~7, Max 630 mmHg |
| Tête Infuse | Niveau 0~10, Max 2.0 Vrms (@ 500 ohm) |
| Tête Workout | Niveau 0~10, Max 3.8 Vrms (@ 500 ohm) |

Gab & Co^H
- DISTRIBUTION -

INDIBA[®]
DEEP BEAUTY FRANCE

Showroom
15 Rue Laugier, 75017 Paris

Tel. +33 1 76 53 86 16
contact@gabandcodistribution.fr

www.gabandcodistribution.fr

