

# ONA

L'esthétique du visage à  
un niveau supérieur



# ONA

## ONA enfreint les règles

L'appareil INDIBA® ONA associe l'hydrodermabrasion (double peeling), l'électroporation, l'électrothérapie par LED et basse fréquence pour hisser votre peau à un nouveau niveau de santé et de pureté.

ONA représente le plaisir, les sensations, la pureté et la perfection. Optimisez et mettez en valeur votre peau avec ONA.

### Bénéfices clés

- Exfolie, nettoie et élimine les impuretés
- Hydrate en profondeur
- Éclaircit et unifie le teint de la peau
- Renforce le tonus musculaire, contribuant ainsi à améliorer les contours du visage
- Améliore l'aspect général de la peau

## Technologie

INDIBA®, innove avec différentes technologies donnant la clé pour satisfaire les besoins de nos clients.

### → Peeling Chimique

Élimine le sébum et les impuretés de la peau, tout en apportant des principes actifs anti-âge grâce à nos solutions ON.

### → Peeling Mécanique

Élimine et nettoie les impuretés par pression sous vide (15 kPa à 80 kPa).

### → Électrothérapie à Basse Fréquence

La basse fréquence modulée (1 kHz) contribue au mouvement du muscle de manière contrôlée afin de tonifier la structure du visage.

### → Électroporation + LED

Favorise la pénétration du sérum hydratant ONA par les pores temporaires des cellules formés à travers des impulsions à haute tension de courte durée.



①  
**Hydrodermabrasion**  
**Tête Cleansing**

(Pièce à main ONA)

► SOLUTIONS

②  
**Électroporation + LED**  
**Tête Infuse**

(Pièce à main ONA EP)

► ONA SÉRUM HYDRATANT

③  
**Électrothérapie à basse**  
**fréquence + massage**  
**Tête Workout**

(Pièce à main ONA Y)

► GEL ONA



# 1. Nettoyage profond

Hydrodermabrasion

## Peeling chimique + mécanique

Il permet d'éliminer les points noirs et les impuretés à l'aide d'une solution spéciale éjectée avec une puissance importante, puis aspirée avec notre embout radial, sans endommager la peau.



Nettoyage et exfoliation sous vide



Nettoyage profond



Pénétration efficace des solutions

## Solutions: ON1, ON2 et ON3



### ON1 AHA

Formule constituée d'un mélange d'alpha-hydroxyacides (AHA) d'origine naturelle et d'extraits apaisants et régénérants, spécialement conçue à exfolier, nettoyer et soigner la peau en profondeur.



### ON2 BHA

Formule conçue pour purifier et régénérer la peau grâce à l'acide salicylique (BHA), à l'extrait de saule et à d'autres principes actifs apaisants et régénérants, convenant parfaitement au traitement des pores obstrués et des imperfections cutanées. Idéale pour la zone T.



### ON3 Complexe anti-âge


Formule spécialement conçue pour restaurer la fonction barrière pour hydrater en profondeur et illuminer la peau grâce à un mélange d'acide hyaluronique, de peptides régénérants et d'extraits de plantes aux effets anti-âge.

## Conseils de traitement



Les solutions ON1, ON2 et ON3 sont réparties radialement dans les embouts de traitement à usage unique. Ces embouts sont disponibles en petites et grandes tailles, permettant de personnaliser le traitement en fonction du type de peau ou de la zone à traiter.

Ce mouvement radial permet de nettoyer les pores en profondeur sans endommager la peau.

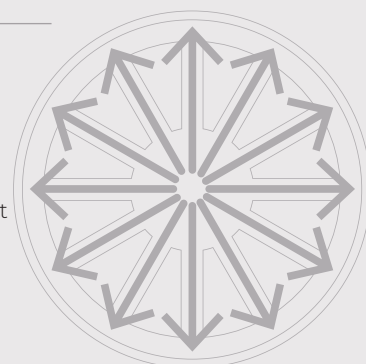

# Infusion et traitement

Synergie technologique

## Électroporation + LED

Renforce et accélère la pénétration des principes actifs du sérum hydratant ONA jusqu'à 5 mm de profondeur.


Grâce aux canaux temporaires formés, la membrane cellulaire est destabilisée par des impulsions à haute tension.

Au cours de ce processus, la structure et la fonction biologiques des cellules ne sont ni endommagées ni modifiées.



### Luminothérapie efficace :

Les différentes longueurs d'onde des lumières LED entraînent une synergie avec l'électroporation améliorant les résultats.

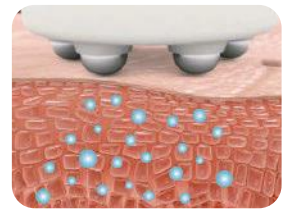

## Sérum hydratant ONA

Sérum concentré à l'effet anti-âge puissant. Grâce à sa teneur en extraits végétaux hydratants et réparateurs, en acide hyaluronique de poids moléculaire moyen et en peptides, le sérum est capable de stimuler la production de collagène et de renforcer la fonction barrière de la peau.

Le sérum hydratant ONA a été spécialement formulé par INDIBA® avec des principes actifs de la plus haute qualité.

Ces ingrédients sont les suivants :

### → Acide hyaluronique de poids moléculaire moyen

Acide hyaluronique d'une taille spécifique capable de stimuler les cellules épithéliales endommagées et/ou vieillissantes, permettant ainsi d'obtenir une peau plus lisse, plus douce et plus uniforme.

### → Bétaïne

Aux propriétés apaisantes, la bêtaïne renforce la barrière cutanée en stimulant la solidité et la cohésion des cellules. Elle atténue les rougeurs et protège la peau à l'exposition des substances nocives.

### → Peptides anti-âge

Petits peptides endogènes dérivés de la protéolyse de la matrice extracellulaire. Ils sont capables de réguler, réparer et régénérer les peaux endommagées et/ou vieillissantes.



# 3. Workout

Effet Anti-âge Total

## Électrothérapie à basse fréquence + massage

Elle stimule les muscles du visage, en contractant et en relaxant les tissus de manière répétée.

Elle atténue également les tensions et améliore l'apport de nutriments en stimulant la circulation sanguine locale.



Courant basse fréquence (1 kHz)



Sphères compactes avec rotation à 360°



Amélioration de l'élasticité de la peau




Massage musculaire par stimulation profonde




Régénération de la peau, stimulation des muscles et élimination des impuretés



Amélioration de la circulation sanguine

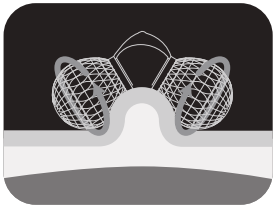

MASSAGE

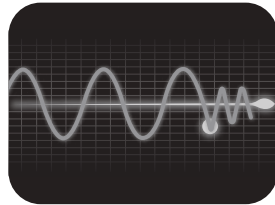

BASSE FRÉQUENCE (1 kHz)

## Gel protecteur pour l'électrothérapie ONA

Gel conducteur spécialement formulé pour maximiser les résultats de l'appareil ONA, de manière sûre et efficace.





## Caractéristiques techniques

Puissance d'entrée	220-240V, 50/60Hz
Fusible d'entrée	2 xT 10AL 250V
Consommation électrique	250 W
Poids	25 kg
Taille	448mm x 438mm x 391mm (H x L x P)
Écran	7" LCD
Tête Cleansing	Niveau 1~7, Max 630 mmHg
Tête Infuse	Niveau 0~10, Max 2.0 Vrms (@ 500 ohm)
Tête Workout	Niveau 0~10, Max 3.8 Vrms (@ 500 ohm)

Gab & Co  
- DISTRIBUTION -

**INDIBA®**  
DEEP BEAUTY FRANCE

Showroom  
15 Rue Laugier, 75017 Paris

Tel. **+33 1 76 53 86 16**  
contact@gabandcodistribution.fr

[www.gabandcodistribution.fr](http://www.gabandcodistribution.fr)

